


NANOPASS®

33

Die dünnste und erste
doppelt-konische
Pen-Nadel der Welt

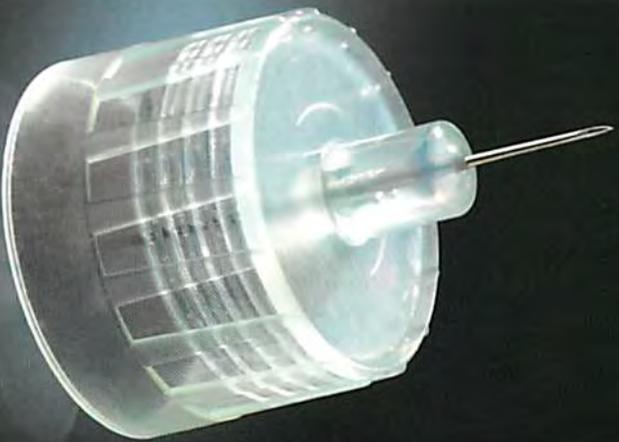

NANOPASS®

33



Artikelnummer:	TN*3305M
Kanülenspitze Ø:	336 (0,2 mm)
Kanülenlänge:	5 mm
Packungsgröße:	100 Stück
PZN:	6698214

TYPE A ISO 11608-2
CE 0197 LARX

Noch Fragen?

www.terumo-diabetes.com

Tel. (gebührenfrei) 0800 3463868

www.terumo-europe.com


TERUMO
DIABETES
SOLUTIONS



NANOPASS®

33

Kanüle für Injektionspens
Die dünnste
Pen-Nadel der Welt

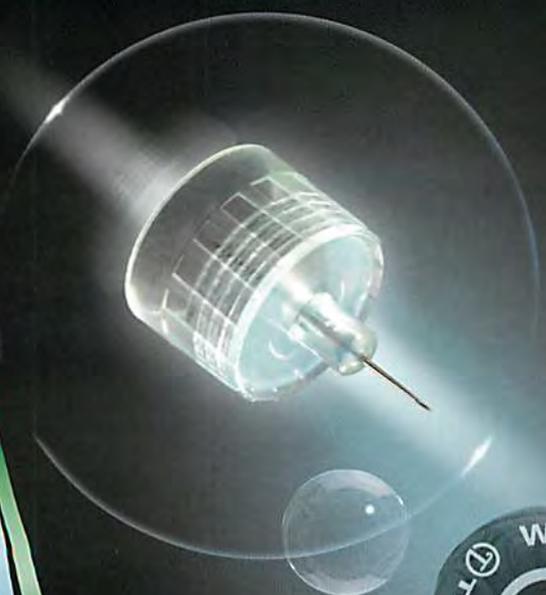

TERUMO



NANOPASS® 33 gewann den „Good Design Grand Prize“ (2005) der Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO)

NANOPASS®
33

Ihre Vorteile

33G (Ø 0,2 mm)
33% dünner
als konventionelle
30G Nadel

Doppelt-konisch
neue Technologie
optimaler
Insulinfluss

Weniger Autsch
einfache Injektion
effektive Therapie

Eine für alle
kompatibel
zu allen Pens (Typ A)

Dünnsste Pen-Nadel der Welt 33G (Ø 0,2 mm)

Eine dünnere Pen-Nadel mindert den Schmerz.
Der Durchmesser der Spitze der NANOPASS®
33 beträgt nur 0,2 mm.

**Damit bis zu 33% dünner als eine
konventionelle 30G Nadel.**

**NANOPASS® 33 passt
perfekt in Ihr Leben**

- weniger Schmerz
- einfache Injektion
- optimaler Insulinfluss



Erste doppelt-konische Pen-Nadel

Je dünner die Kanüle, desto höher der
Injektionswiderstand. Die doppelt-konische
Form der NANOPASS® 33 hat sich über
herkömmliche Technologien hinweg gesetzt.



NANOPASS® 33 reduziert den Injektions-
widerstand spürbar.

Überzeugen Sie sich selbst!



TERUMO
FINETOUCH®

Die perfekte Kombination
aus Design & Zuverlässigkeit



TERUMO
FINETOUCH®

Artikelnummer	PZN
 MS-GK1TMGDE	6943292 (mg/dL)
MS-GK1TMDE	6943300 (mmol/L)
 MS-GC25C (25 Stück)	4604491
 MS-GN4525C (25 Stück)	6633769



TERUMO
FINETOUCH®

Blutzuckermesssystem



Noch Fragen?

www.terumo-diabetes.com
Tel. (gebührenfrei) 0800 3463868

DI 81DE-0110FD-11(11.10)E

TERUMO®

TERUMO
FINETOUGH®

Entdecken Sie die
TERUMO Diabetes Welt

Smarte Testspitze
einfaches Aufsetzen
ausgeklügelte
Anwendung

**Trendiges
Design**
metalllic Look
handliche Form

Ohne Blutkontakt
sauberer Abwurf
sichere Entsorgung

XL Datenspeicher
500 Werte
Download
Schnittstelle

Vertrauen Sie
TERUMO FINETOUGH®

*Blutzuckermessung muss einfach
GENAU sein!*

- TERUMO FINETOUGH® liefert zuverlässige Messergebnisse und erlaubt somit eine sichere Entscheidung über die richtige Insulindosis.

*TERUMO FINETOUGH® passt perfekt
in Ihr Leben*

- diskret testen
- sicher entsorgen
- sauber
- erhältlich in mg/dL und mmol/L



Einfach WENIGER
AUTSCH!

Das Lanzettengerät

- mit ♥
- 5 einstellbare Stechtiefen
- minimale Stechtiefe nur 0,3 mm



*Weniger Schmerz
bei jedem Stich!*




Überzeugen Sie sich selbst!
TERUMO FINETOUGH® Starterkit





TERUMO FINETOUCH[®]

Lanzettengerät Typ S zur kapillaren Blutentnahme

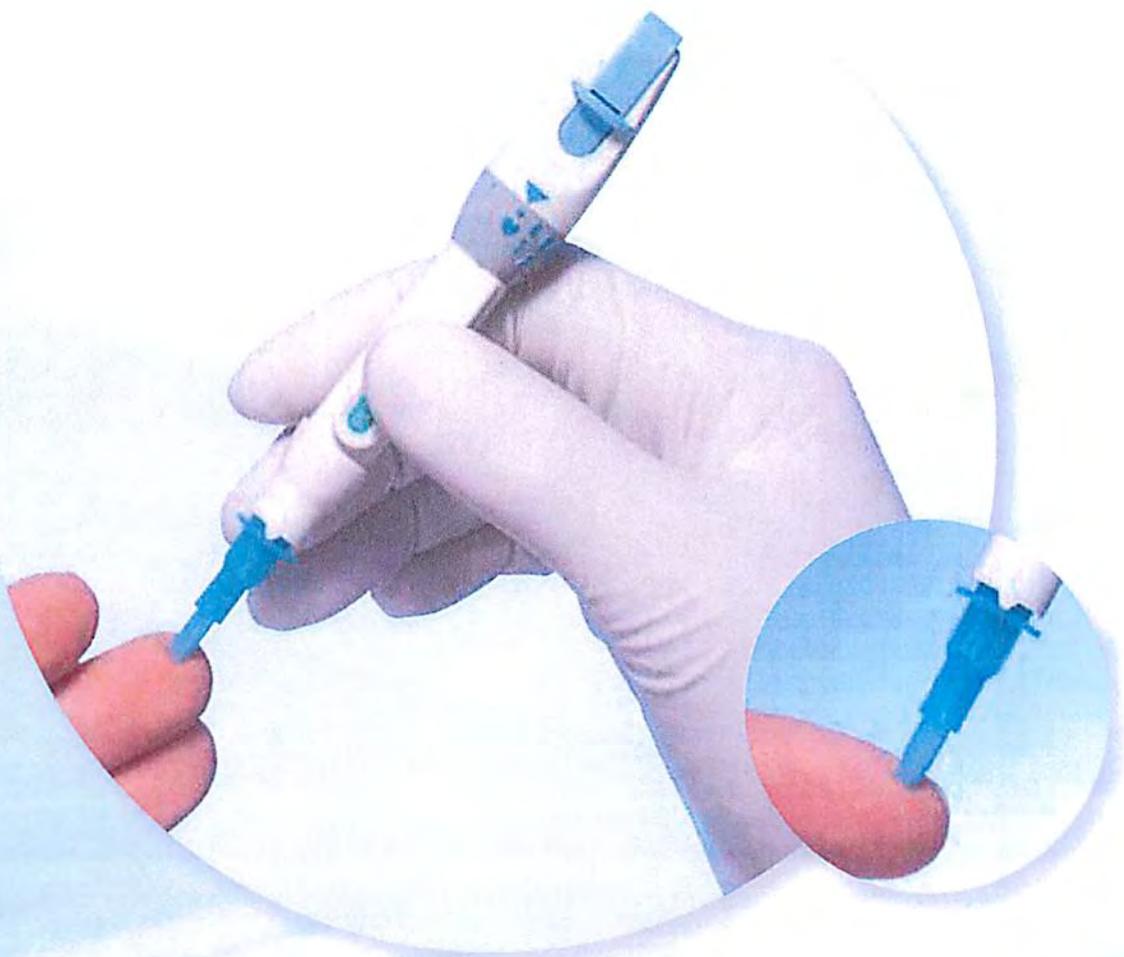


Sicherheit war noch nie so sanft

- *Weniger Schmerz*
- *Sichere Anwendung*
- *Einfache Handhabung*


Sicherheit war noch nie so sanft

Weniger Schmerz

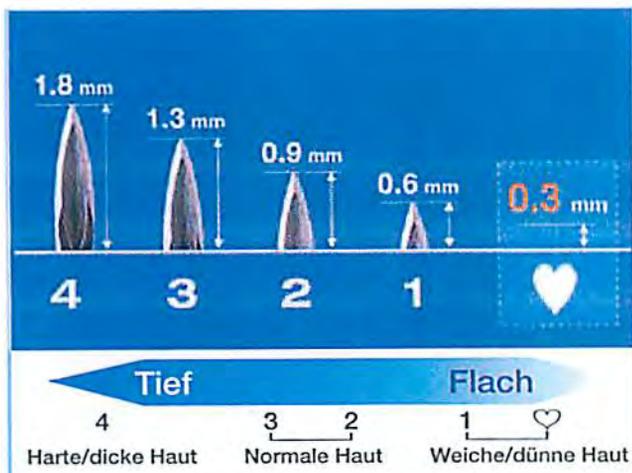

5 einstellbare Stechtiefen

- Anpassbar an den individuellen Hauttyp des Patienten
- Geringe Stechtiefe, nur 0,3 mm
- Ermöglicht eine besonders sanfte Blutentnahme

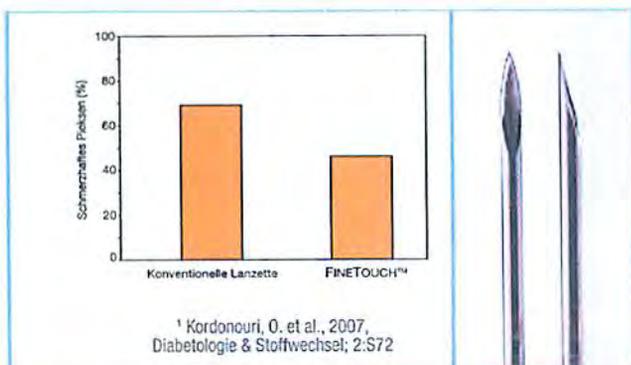

Funktionelles Design

- Hohlraumkanüle mit speziellem Schliff für spürbare Schmerzreduktion.
- In einer Studie empfanden 54% der Patienten die Finetouch® Lanzette als schmerzarm, 31% die konventionelle Lanzette.¹



Durch die kleine Auflagefläche der Lanzettengehäuse-Spitze ist die gewünschte Punktionsstelle besonders leicht zu treffen.

Sichere Anwendung

Hygienische Handhabung

- Das Lanzettengehäuse schützt das Lanzettengerät vor Hautkontakt und Verunreinigung mit Blut und verhindert so eine Kreuzkontamination.

Sicherheit für Anwender

- Die Lanzettenkanüle ist vor und nach dem Einstich von einem Kunststoffgehäuse umgeben, zum Schutz vor unbeabsichtigten Nadelstichverletzungen.
- Die Mehrfachverwendung einer Lanzette ist nicht möglich. Erst das Aufsetzen einer neuen Lanzette gibt den Auslösemechanismus wieder frei.


Einfache Handhabung

Die Lanzette wird mit einem einfachen Handgriff in das Lanzettengerät eingesetzt.
Wenn Sie ein „Klick“ hören, ist das Gerät einsatzbereit.



1. Stechtiefe einstellen:

Gewünschte Einstichtiefe mit dem Wählrad einstellen.

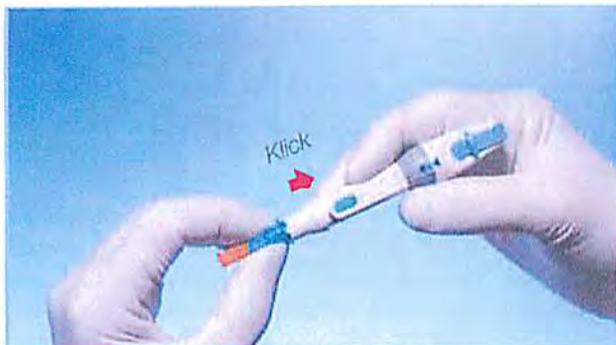

2. Lanzette einsetzen:

Lanzette fest bis zum Anschlag einschieben
(deutlicher Klick hörbar).

Orangefarbene Schutzkappe drehen und abziehen.



3. Blutentnahme:

Lanzette leicht gegen die Haut drücken und Auslöse-
taste (PUSH) drücken.



4. Entsorgung:

Lanzette abziehen und sicher in einem dafür vorge-
sehenen Behälter entsorgen.

TERUMO FINETOUCH®

TERUMO FINETOUCH® Lanzettengerät Typ S



Artikelnummer	Sprachen	Verpackung
MS*GN03C	EN / FR / DE / NL / IT / EL	1 / 10 / 100

TERUMO FINETOUCH® Lanzette



Artikelnummer	Sprachen	Verpackung
MS*GN4530C	EN / FR / DE / NL / IT / EL	30 / 300 / 3000



Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

European Offices

Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396
Fax: 0800 0220414

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 130 96 13 00
Fax: +33 130 43 60 85

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Bodenackerstrasse 3
8957 Spreitenbach, Switzerland
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11

Terumo Europe España SL
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid),
Spain
Tel.: +34 9021 01 298
Fax: +34 9021 01 358

Terumo Italia S.r.l.
Via Simone Martini, 143/145
00142 Roma RM,
Italy
Tel.: +39 0651 96 14 20
Fax: +39 0650 30 407

Terumo Sweden AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
426 71 Västra Frölunda,
Sweden
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890

Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80

Terumo UK Ltd
Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax: +44 1784 476 201

Terumo Europe N.V.
Moscow Representative Office
BC Northern Tower
13Fr., 10 Testovskaya Street
Moscow 123317, Russia
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

*Addresses subject to change,
please consult our Website.*

© Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
DI 42DE-0908TE-11(04.12)E


FINETOUCH™ Lanzettengerät




Schritt 1 – Vorbereitung



1 Gewünschte Einstichtiefe mit Währad einstellen.

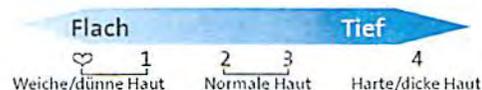

2 Lanzette bis zum Anschlag (deutlicher Klick) einschieben. Lanzettengerät seitlich anfassen!

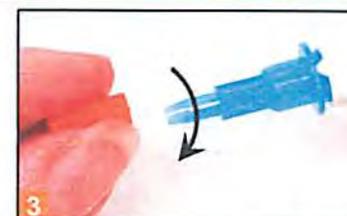

3 Schutzkappe drehen und abziehen.

Schritt 2 – Blutentnahme



4 Lanzette leicht gegen die Haut drücken und Auslösetaste (PUSH) drücken.

Schritt 3 – Entsorgung



5 Lanzette abziehen und sicher in einem dafür vorgesehenen Behälter entsorgen.

Achtung: Sobald die Lanzette einmal entfernt wurde, nicht wieder verwenden!

TERUMO FINETOUCH®

DIABETES SOLUTION - Produktinformationen

	Produkt	Verpackung	Artikelnummer
	TERUMO FINETOUCH® Blutzuckermesssystem Inhalt: 1 Blutzuckermessgerät, 25 Testspitzen, 1 Lanzettengerät, 25 Lanzetten, 1 Spitze für Geräte- prüfung, 1 Etui, 2 Batterien	1 Set	MS-GKITMGDE (mg/dL) PZN 6943292 MS-GKITMMDE (mmol/L) PZN 6943300
	TERUMO FINETOUCH® Testspitze	25 Stück	MS*GC25C PZN 4604491
	TERUMO FINETOUCH® Lanzettengerät	1 Stück	MS*GN02C PZN 1061475
	TERUMO FINETOUCH® Lanzette	25 Stück	MS*GN4525C PZN 6633769



European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +33 16 38 12 11
Fax.: +33 16 40 02 49

European Offices

Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax.: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 022 03 96
Tel.: 0800 022 04 14

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax.: +49 6196 80 23 200

Terumo Italia s.r.l.
Via Simone Martini, 143 / 145
00142 Roma RM, Italy
Tel.: +39 06 519 61 420
Fax.: +39 06 503 04 07

Terumo UK Ltd
Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax.: +44 1784 476 201

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 1 30 96 13 00
Fax.: +33 1 30 43 60 85

©: Eingetragenes Warenzeichen
Herausgegeben von Terumo Europe N.V.



Noch Fragen?

www.terumo-diabetes.com
diabetes@terumo-europe.com